

コンパクトで簡単操作の 小型包装品用高圧蒸気滅菌器

Point 1

→ Compact ←

設置場所を選ばない、コンパクト・軽量設計

シンプル設計で大幅な小型化・軽量化を実現。サイズを気にせずに置き替え可能です。



Point 2

Water

衛生的な『毎回給水方式』

つねに清浄な水を使用する『毎回給水方式』のため、衛生的です。蒸留水や精製水のみでの滅菌にも対応しています。



Point 3

ECO Mode

待機電力を自動的に抑える『ECOモード』

ステリウィットVを操作していない状態で10分間経過すると、自動的に『ECOモード』に切り替わります。待機電力をカットし、ムダな電力消費を抑えます。




小型包装品用高圧蒸気滅菌器 ステリウィットV

■本体仕様

販 売 名	ステリウィットV
型 式	SV-TA1N1
外 形 寸 法	幅412×奥行469×高さ344mm
本 体 質 量	約21kg
使 用 電 源	AC100V/50/60Hz
消 費 電 力	950W
入 力 装 置	シートキースイッチ
表 示	7セグLED・LED
缶 内 有 効 寸 法	φ220×340mm
収 納 力	18cm丸カスト2個又は角カスト(NS-250-6)1個
貯 水 槽 容 量	3.5L
乾 燥 方 式	ヒーター加熱(ドア開け乾燥)
滅 菌 温 度	121℃/135℃
滅 菌 時 間	121℃/24～99分 135℃/7～99分
乾燥時間設定(標準)	0～99分(30分)
圧 力 計	0～0.4MPa
安 全 弁 吹 出 圧 力	0.26MPa
安 全 装 置	安全弁・温度ヒューズ・空焚き防止温度ヒューズ・漏電ブレーカー
付 属 品	スノコ専用給水カップ
使 用 環 境	温度範囲5～40℃・相対湿度MAX80%(5～31℃) MAX50%(31～40℃)・標高2,000m以下
使 用 水	水道水・蒸留水・精製水
オ プ シ ョ ン	角カスト・架台・金網バスケット・積重式トレートレー用取っ手
消 耗 品	小型滅菌器用洗浄剤・タカゾノ製滅菌バッグ
電撃保護の形式と程度	クラスI B形
一 般 的 名 称	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医 療 機 器 ク ラ ス	クラスII(特定保守管理医療機器)
認 証 番 号	227AGBZX00084000 JIS規格(JIST7324:2005) EMC規格(JISC61326-1:2017)
対 応 規 格	電気用品安全法

■外形寸法図

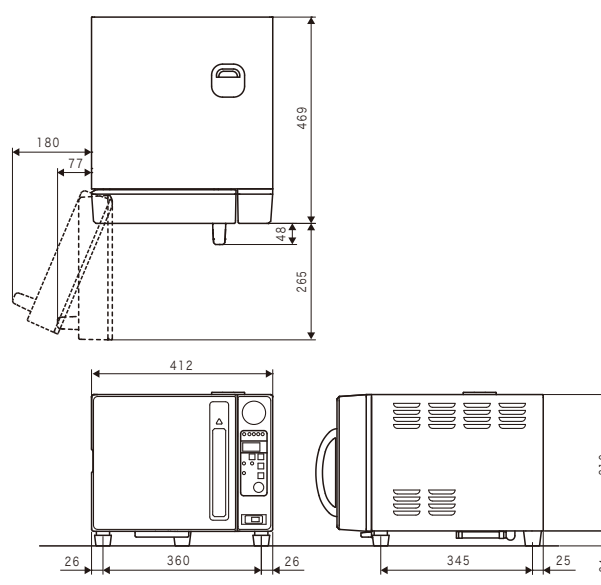

ステリウィットV を安全にご使用いただくために

電源は、必ず交流100V 15A以上の医用コンセント(アース付き)に接続してください。
また、本体を電源に接続する際、テーブルタップや変換プラグ等は使用しないでください。
(ともに故障および火災の原因となります。)

■オプション

架 台

●外形寸法:
幅480×奥行480×高さ750mm



積重式トレー

●外形寸法:幅140×奥行275×高さ30mm

トレー用取っ手



※最大3段まで収納可能

角カスト

●外形寸法:幅180×奥行320×高さ110mm

※上下開閉タイプ



金網バスケット

●外形寸法:幅200×奥行300×高さ145mm



■消耗品

洗浄剤

洗浄剤を使用することで、チャンバー内の普段の清掃では取れない、こびりついた汚れをスッキリ落とします。



※一箱12袋入り

※ご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
※機能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。カタログ掲載の製品については印刷の関係で製品カラーが異なる場合がありますのでご了承ください。

タカゾノは、社会貢献活動と環境保全活動を積極的に推進しています。

積極的な障がい者雇用

特別子会社(株)タカゾノサーブスを設立し、障がい者の雇用を推進しています。

ピンクリボン運動

オフィシャルサポーターとして、日本乳がんピンクリボン運動を支援しています。

エコ活動

地球温暖化防止のために電気使用量の削減やエコ運転等に取り組んでいます。

かものはしプロジェクト

インドの子どもや女性を支援するNPO法人の活動に協賛しています。

株式会社 タカゾノ

営業本部

東京都中央区豊2-8-3目12番1号 FOREFRONT TOWER 6階 〒104-0054 ☎03(3533)2130 Fax03(3533)2136

札幌営業所

☎011(788)1570

函館S.S.

☎0138(52)0560

旭川営業所

☎0166(34)8820

釧路S.O.

☎0154(31)8102

青森S.O.

☎0177(72)6678

盛岡営業所

☎019(634)1434

仙台営業所

☎022(246)5860

秋田S.O.

☎018(825)9670

郡山営業所

☎024(938)5255

北関東営業所

☎029(304)0170

宇都宮S.O.

☎028(651)1551

前橋S.O.

☎027(256)7330

さいたま営業所

☎048(710)7770

千葉営業所

☎047(403)4881

東京営業所

☎03(591)5531

多摩営業所

☎042(635)1620

横浜営業所

☎045(914)7100

新潟営業所

☎025(234)3671

金沢営業所

☎076(238)9751

長野営業所

☎0263(39)7012

静岡営業所

☎054(654)3351

名古屋営業所

☎052(528)3777

京都営業所

☎075(641)5805

大阪営業所

☎06(6903)5300

大阪南営業所

☎06(6903)0140

神戸営業所

☎078(579)8810

山陰S.S.

☎0852(53)2030

岡山営業所

☎086(246)2200

広島営業所

☎082(850)0333

山口S.S.

☎083(972)8900

高松営業所

☎087(865)3911

松山営業所

☎089(905)2644

高知S.S.

☎088(880)3171

北九州S.S.

☎093(923)5454

福岡営業所

☎092(513)5115

長崎営業所

☎0957(49)9191

熊本営業所

☎096(312)5005

大分営業所

☎097(503)9535

宮崎S.S.

☎0985(634)4741

鹿児島営業所

☎099(281)8775

沖縄営業所

☎098(884)6336

※[SS]はサービスステーション
[SO]はサテライトオフィスの略称です。

●お問い合わせお問い合わせは・・・

【ホームページアドレス】 <https://www.takazono.co.jp>

CTL-405J 2023.02.035.S

TAKAZONO

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

ステリウィットV

小型・軽量・シンプル操作を追求



ステリウィットV
SV-TA1N1

株式会社 タカゾノ

シンプル機構。 でもしっかり滅菌。



ステリウィットVは
軽量・コンパクトな設計ながら、**18cm**丸カストを
2個収納可能な小型包装品用高圧蒸気滅菌器です。

小型包装品用高圧蒸気滅菌器

ステリウィットV
SV-TA1N1



こんなお客さまにおススメ！

滅菌作業は
1日**1~2**回

安価でも
しっかり
滅菌したい

サブ機を
探している

操作は
シンプル
がいい


6ステップの簡単操作

シンプルに徹した設計だから、手順が覚えやすく、操作は簡単です。

スタート
Start



1. 専用給水カップで
チャンバー内に注水

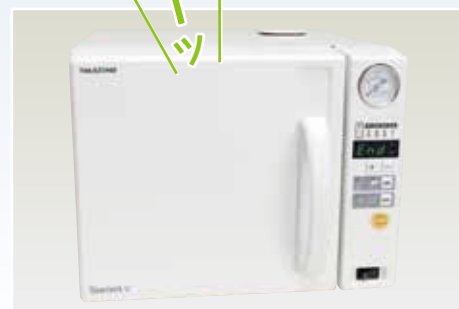

6. 乾燥運転終了後、乾燥完了を
アラームでお知らせ



2. 被滅菌物を入れて
ドアをロック



5. ドア開放で、乾燥運転が
自動スタート



3. 操作パネルのスタートキー
で滅菌開始



4. 滅菌・排蒸完了を
アラームでお知らせ

シンプル設計の操作パネル

ドアLED
ドアの開閉状態を表示。
LEDの点灯時はドアが開まっている状態です。

7セグLED
滅菌温度、工程時間を表示。

+キー/-キー
滅菌時間や乾燥時間を設定する際に
使用。



工程LED

加熱から完了にかけて、現在の動作状態をLEDで表示。

滅菌キー

135℃・121℃・乾燥のみが選択可能。

乾燥キー

乾燥有り・無しが選択可能。


スタート・ストップキー

機械を動作開始または停止します。

『毎回給水方式』でつねに衛生的



ここに
給水！

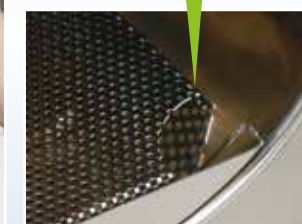

ステリウィットVは『毎回給水方式』を採用しているので、いつも清浄な水で滅菌作業を行います。使用できる水は水道水・蒸留水・精製水に対応しています。

ドアを開けると乾燥が自動でスタート



ドアは
◀まで
開放で
OK！

滅菌・排蒸完了後、アラームでお知らせ。その後にドア開放で、乾燥工程が自動的に開始します。ドアの開け忘れを防ぐ再アラーム機能も備えています。